

ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия Мезороллер

Наименование медицинского изделия.

Мезороллер

Варианты исполнения:

1. Мезороллер, вариант исполнения DRS192;
2. Мезороллер, вариант исполнения DRS540.

Назначение.

Мезороллер предназначен для процедуры микроигольчатой терапии (мезотерапии) на всех частях лица и тела для индивидуального применения в домашних условиях.

Принцип работы мезороллера.

Иглы создают в коже до полумиллиона микроканалов. Такое количество микроповреждений активирует слаженную работу всех клеток, которые немедленно начинают «ремонтную» деятельность: активно восстанавливают структуру кожи и максимально интенсивно вырабатывают собственный коллаген и эластин – белки, отвечающие за гладкость и упругость кожи, улучшают кровообращение. Кроме того, через образовавшиеся каналы, косметические средства транспортируются глубоко в кожу, именно туда, где они необходимы, в результате эффективность их воздействия многократно усиливается. Также в результате воздействия происходит подкожная стимуляция дермальных фибробластов, синтеза собственного коллагена, а создаваемые микроканалы облегчают трансдермальное проникновение активных молекул.

Сочетание стимулирующего действия микроигл и активных компонентов косметических средств, обеспечивают максимальный положительный результат при коррекции различных эстетических дефектов

Показания.

✓ Лицо:

- Возрастные изменения кожи лица, шеи, декольте, морщины, сниженный тонус и тургор, нарушение четкости контуров овала лица, гравитационный птоз и проблема «второго подбородка». В области вокруг глаз: морщины, отеки, темные круги и гиперпигментация.

- В любом возрасте изменение цвета кожи и кожного рельефа, тусклый и неровный цвет и тон кожи, уставшая и атоничная кожа, стрессовое состояние кожи, расширенные поры, пигментация различного происхождения, состояние постакне, атрофические рубцы, застойные пятна и инфильтраты.

✓ Тело:

- Дряблость, сниженный тонус, тургор и эластичность кожи тела, рубцы и шрамы различной локализации и происхождения, растяжки, целлюлит.

✓ Область волосяного покрова:

- Замедление роста волос, аллопеция различного генеза, как у мужчин, так и у женщин.

Противопоказания.

Акне, герпес, экзема, выступающие родинки, дерматологические процедуры.

Меры предосторожности.

- Не используйте изделие по истечении срока годности (может вызвать инфицирование).
- Избегайте применения сосудосуживающих средств;
- Избегайте применения любых продуктов, которые могут привести к повреждению клеток или тканей;
- Избегайте применения материалов, вызывающих аллергию;
- Старайтесь избегать применения парфюмерии и искусственных красителей;
- Не прилагайте слишком больших усилий при использовании мезороллера;
- Прилагайте минимальные усилия при движении вокруг губ и глаз, поскольку кожный покров в этих областях гораздо тоньше. Не используйте роллер для движения по глазным векам;
- Не используйте изделие на детях и животных.

Возможные побочные действия.

В случае высыпания или любого другого нежелательного явления следует немедленно прекратить использование изделия. Если у вас есть прогрессирующая угревая сыпь, используйте изделие только после консультации с врачом, поскольку существует риск распространения угрей.

Способ применения.

Шаг 1. Очищение кожи

Предварительно очистите кожу с помощью лосьона или дезинфицирующего средства.

Шаг 2. Использование мезороллера

Разделите область обработки на отдельные зоны (например, лицо: лоб, нос, щеки, область вокруг рта, шея). Каждую зону обработайте с одинаковым нажимом по вертикали, горизонтали, диагонали по 5-10 раз в каждом направлении. Прокатывать мягко, без сильного нажима. Интенсивность обработки подбирается индивидуально. Повторять процедуру не чаще одного раза в день. Возможно использование как отдельно, так и совместно с косметическими средствами (сыворотками, лосьонами, кремами).

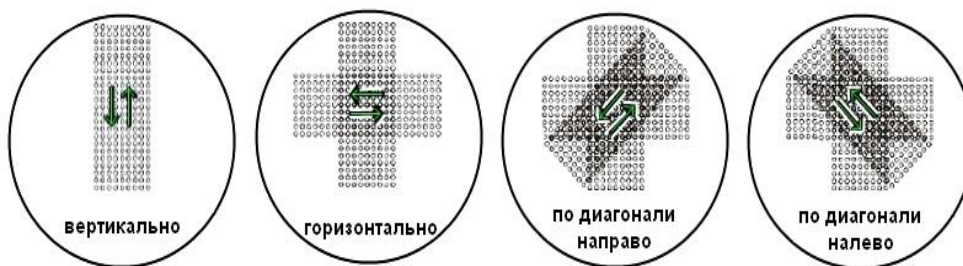


Схема обработки

***Совет:** Нанесите успокаивающее и увлажняющее средство для лица / тела / области волосяного покрова на обработанную область. В период солнечной активности рекомендуется использовать защитный крем от солнца.

Шаг 3. Уход за мезороллером Мезороллер – изделие индивидуального назначения. При первом применении стерилен, поэтому предварительной подготовки не требует. После каждой процедуры его необходимо промыть под струей горячей воды, затем обработать 3% раствором перекиси водорода (путем погружения в емкость на 30 минут) и поместить в защитный кейс (футляр), поставляемый в комплекте.

Технические характеристики мезороллера

Материал игл – титан. Количество игл ~ 192, 540 в зависимости от варианта исполнения. Длина игл – 0,5 мм.

Толщина игл – 0,2 мм.

ВАЖНО! Не использовать мезороллер с тупыми иглами, при деформации игл, нарушении целостности упаковок.

Особые указания: Мезороллер можно использовать до тех пор, пока у него острые и прямые иглы. Как только иглы у мезороллера затупились, или погнулись, он начнет повреждать кожу, поэтому необходимо отказаться от его использования и заменить новым. Пользоваться одним мезороллером в домашних условиях 6-8 месяцев по 1 -2 процедуре в неделю, при условии бережного использования, исключая падения и соприкосновения с твердыми поверхностями.

Комплектность: Мезороллер (в кейсе); внутренняя упаковка (пакет); потребительская тара (картонная коробка); инструкция по применению.

Условия применения: В жилых помещениях в местах постоянного проживания, при индивидуальном домашнем применении, в соответствии с условиями эксплуатации при температуре от плюс 18 до плюс 30°C и влажности от 20 до 80%.

Хранение: В закрытом пластиковом кейсе, поставляемом в комплекте, при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и влажности от 20 до 80%, без конденсации. При хранении следует обеспечить защиту от механических повреждений, воздействия влаги и прямого попадания солнечных лучей.

Транспортирование: При температуре от минус 50 до плюс 50°C и влажности от 10 до 80%.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.

Гарантийные обязательства: Изготовитель гарантирует качество мезороллера в течение 5 лет с даты изготовления при условии соблюдения условий хранения, если он используется в соответствии с инструкцией по применению, при соблюдении целостности упаковки, без повреждений и соблюдения срока годности изделия перед использованием.

Утилизация: Мезороллер подлежит утилизации как бытовые отходы.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10 утилизация данных медицинских изделий осуществляется, как отходы класса А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 8707 от 06.08.2019 г

Производитель: «Гуанчжоу Икай Электроник Текнолоджи Ко., Лтд», (Guangzhou Ekai Electronic Technology Co., Ltd), Китай

Адрес: West of 3/F, No.81-1, Dongsha Zijing Avenue, Liwan District, Guangzhou, Китай.

Уполномоченный представитель производителя: ЗАО «Эвалар», Россия, Алтайский край, 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6

Обозначения символов

Символ	Наименование символа
	Стерилизация этилен оксидом
	Обратитесь к инструкции по применению
	Производитель

Символ	Наименование символа
	Дата изготовления
	Использовать до

Символ	Наименование символа
	Хрупкое. Осторожно обращаться
	Не использовать при повреждении упаковки